

Contour next link 24

Målesystem for blodsukker med trådløs overføring

Bruk kun CONTOUR®NEXT teststrimler




ASCENSIA Diabetes Care


Medtronic

LOMMEGUIDE

Blodsukkerapparat

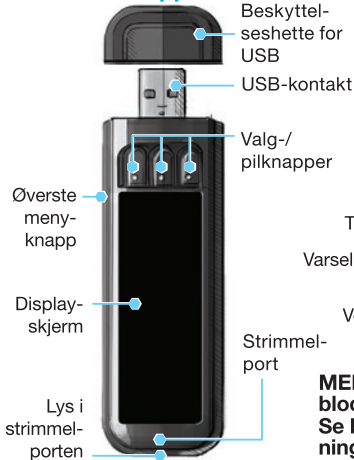

Pumpe

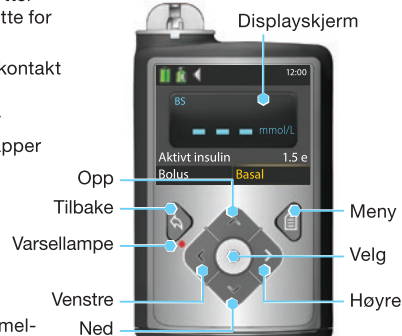

MERK: Sjekk måleenheten på blodsukkerapparatet ditt. Se blodsukkerapparatets brukerveiledning for fullstendige anvisninger.

90004186 Rev. 07/19

Førstegangsoppsett av blodsukkerapparat og kobling til MiniMed® 640G Insulinpumpe

Lade opp blodsukkerapparatet

1 Fjern USB-hetten for å vise USB-kontakten.



CONTOUR®NEXT LINK 2.4 blodsukkerapparatet har et oppladbart batteri.

Lad opp blodsukkerapparatet med veggladeren* eller ved å plukke inn USB-kabelen i en datamaskin. Kontroller at datamaskinen er slått på.

Blodsukkerapparatet vil kort vise "Ikke mål - lader" og lyset i strimmelporten vil blinke. **Du kan ikke foreta en blodsuktermåling mens batteriet lader.**


Når apparatet er fulladet, vil lyset i strimmelporten slås av. Koble fra CONTOUR NEXT LINK 2.4 blodsukkerapparat for å måle.

Koble blodsukkerapparatet fra strømkilden før du starter Førstegangsoppsettet

2 For å starte førstegangsoppsettet trykker du på den øverste menyknappen i flere sekunder til blodsukkerapparatet slås på.



3 Bla ned for å velge språk. Trykk på OK.

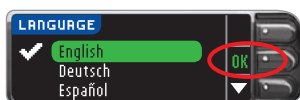

Her vises et eksempel på skjermbildet for språkvalg. Språkernes rekkefølge kan variere, avhengig av det enkelte land.


4 Trykk på OK når ønsket språk vises. Trykk på No hvis feil språk vises.

Koble til pumpe

5 Koble til en MiniMed Pumpe? Trykk på OK.



6 Trykk på OK.

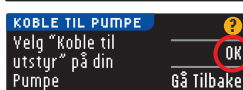


7 Legg fra deg blodsukkerapparatet og ta opp pumpen.

Trykk på hvilken som helst knapp for å slå på skjermen, trykk deretter på menyknappen.


Bruk pil ned for å bla til **Verktøy**.

Trykk på Velg-knappen.

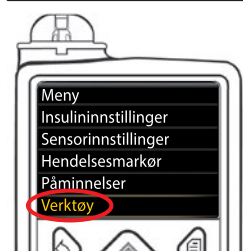


Hvis skjermen på pumpen går i dvale, trykker du på hvilken som helst knapp for å slå den på igjen.

8 Bruk pil ned i Verktøy-menyen for å bla til **Utstyrvalg**. Trykk på Velg-knappen.

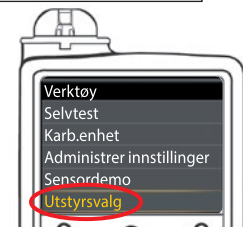


9 Bla til **Koble til utstyr** i menyen Utstyrvalg. Trykk på Velg-knappen.

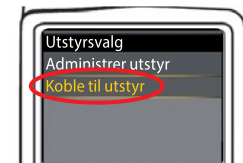

10 Plasser blodsukkerapparatet og pumpen ved siden av hverandre. Velg **Automatisk tilkobling** på pumpen.


Velg **Automatisk tilkobling** på blodsukkerapparatet.

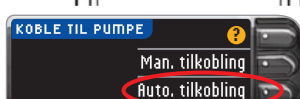

11 Les på skjermen på pumpen ved å bruke pil ned for å rulle til neste side.

Bruk pilknappene for å bla til **Fortsett**.


Trykk på **Velg**-knappen.

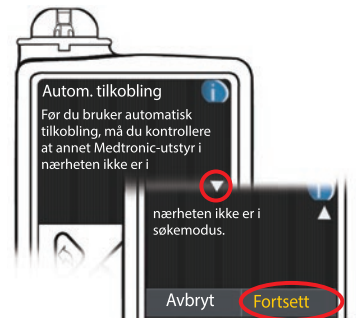

12 Plasser blodsukkerapparatet og pumpen ved siden av hverandre. Velg **Søk etter** på pumpen.

Velg **Søk etter** på blodsukkerapparatet.


Søket kan ta opptil 2 minutter.

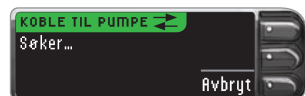

13 Kontroller om utstyrets serienr (serienummer) på **pumpen** samsvarer med enhetens SN på **blodsukkerapparatet**.

Rull ned til **Bekreft** på pumpen hvis de samsvarer.

Trykk på **Velg**-knappen.

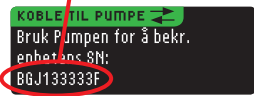

Når pumpen kobles til blodsukkerapparatet, vil SN på skjermen til **blodsukkerapparatet** endres til et annet serienummer. Dette nummeret er **pumpens** serienummer.

14 Snu pumpen.

Forsikre deg om at SN på baksiden av **pumpen** samsvarer med serienummeret som vises på skjermen til **blodsukkerapparatet**.

Trykk på **Neste**.



15 Velg **Alltid** og trykk på **OK** på neste skjerm-bilde.




16 Velg **Dato format**.




17 Trykk på **OK**.

Merk: Hvis tiden og datoen er feil, må du endre dem på pumpen.

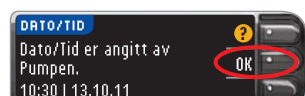

18 Trykk **Godta** for å velge **AutoLog er Av**.

AutoLog lar deg markere et blodsukkerresultat som **Fastende**, **Før Måltid** eller **Etter Måltid**. Se brukerveiledningen for mer informasjon.

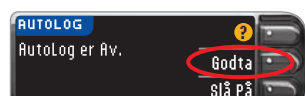

*Det kan hende at vegglader ikke er inkludert i alle blodsukkerapparatsett. Kontakt kundeservice for informasjon om anskaffelse av vegglader.

Vend siden for å fullføre førstegangsoppsettet. →


19 Godta eller Endre Varsler for Høy og Lav.

Blodsukkerapparatet varsler deg med en lyd når blodsukkeret ditt er under eller over de angitte verdiene.



20 Godta eller Endre målområdet.

Målområdet er ditt mål for dine blodsukkerresultater.

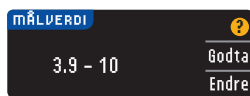

MERK: Varsler kan kun settes utenfor det/de valgte målområdet/-ene. Målområder kan kun angis innenfor ditt/dine valgte varselnivå/-er. Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon. Se kontaklinformasjon for kundeservice nedenfor.

21 Ditt førstegangsoppsett er nå ferdig og klar til å utføre en blodsukkermåling.

Gå til trinn 1 nedenfor.

✓ Oppsettet er fullført. Sett inn strimmelen for å starte målingen.

Materialer for blodsukkermåling



CONTOUR®NEXT teststrimler



Stikkepenn



Lansett



CONTOUR®NEXT LINK 2.4 blodsukkerapparat

⚠ VIKTIG:


- Stikkepennen er beregnet for egenmåling av én enkelt person. Den må ikke brukes på mer enn én person på grunn av smittefare.^{1,2}
- ⓧ Bruk en ny lansett hver gang du utfører en måling, da den ikke lenger er steril etter bruk.
- Alle deler i denne enheten betraktes som biologisk smittfarlige og kan potensielt overføre smittsomme sykdommer, også etter at du har rengjort og desinfisert dem.
- Vask alltid hendene godt med såpe og vann og tørk dem godt før og etter måling og håndtering av blodsukkerapparatet, stikkepennen eller teststrimlene.

For fullstendige instruksjoner om rengjøring av blodsukkerapparatet, vennligst se brukerveiledningen for ditt blodsukkerapparat.


Måle blodsukkeret ditt

Lage bloddråpe

- 1 Sett inn blodsukkerstrimmelen og vent på meldingen **TILFØR BLOD**.

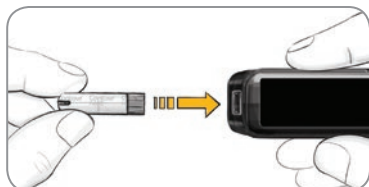


- 2 Fjern stikkepensens munnstykke. Sett lansetten godt inn i stikkepennen til den stopper helt.

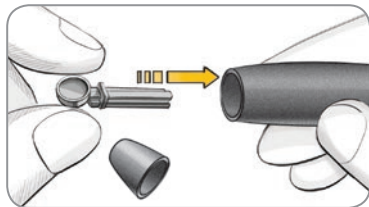


Tegningene av stikkepennen er kun til illustrasjonsformål. Din stikkepenn kan se annerledes ut. Se pakningsvedlegget til stikkepennen for detaljerte instruksjoner om klargjøring av stikkepennen.

- 3 Sett på munnstykket. Roter innstillingshjulet på munnstykket for å justere stikkedybden.

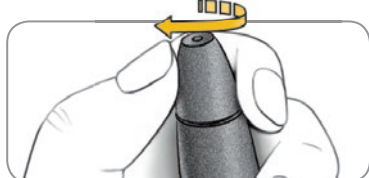


- 4 Lage bloddråpe.

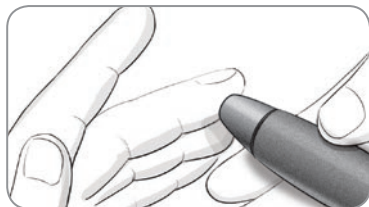

Måle bloddråpe

- 5 La prøveenden på blodsukkerstrimmelen berøre bloddråpen. Hvis den første bloddråpen ikke er nok, piper blodsukkerapparatet to ganger og viser meldingen **STRIMMEL MANGLER BLOD**. Du har omtrent 30 sekunder på deg til å tilsette mer blod på den samme blodsukkerstrimmelen.

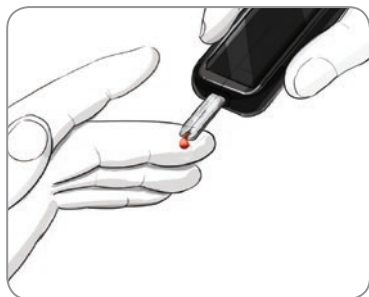

MERK: Hvis AutoLog er PÅ, vil du bli bedt om å markere blodsukkerresultatet som Fastende, Før Måltid eller Etter Måltid før blodsukkerresultatet vises. Hvis blodsukkerresultatene dine er over innstillingen du har satt som Høyt varselnivå eller under innstillingen du har satt som Lavt varselnivå, vil du se blodsukkerresultatet ditt uten å ha foretatt et AutoLog-valg.

Referanser

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Sende blodsukkerresultater til MiniMed pumpen

- 6 Hvis **Alltid** ble valgt i **Send konfigurasjon** under **Oppsett**, vil blodsukkerresultater sendes direkte til pumpen. Hvis **Spør meg** ble valgt i **Send konfigurasjon** under **Oppsett**, kan du velge å sende blodsukkerresultatene dine til pumpen etter hver blodsukkermåling.



Trykk på **Send** eller **Ikke Send**.

VIKTIG: Se alltid skjermen på pumpen for å forsikre at blodsukkerresultatet som vises samsvarer med blodsukkerresultatet som vises på blodsukkerapparatet.


Bolus, Påminnelse og Markeringer

- 7 Velg **Bolus** for å sende en bolus til pumpen. Velg **Påminnelse** for å sette en påminnelse for din neste måling. Velg **Markering** for å legge til mer informasjon til blodsukkerresultatene.



Bekreft at blodsukkerresultatet ble sendt til pumpen

- 8 Ta opp pumpen. Trykk og hold inne Tilbakeknappen for å komme til hovedskjermen. Ditt blodsukkerresultat skal vises på pumpeskjermen.

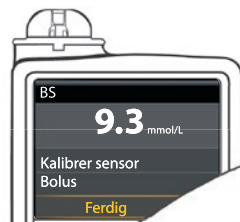

Slå av blodsukkerapparatet

- 9 Ta ut blodsukkerstrimmelen, så vil blodsukkerapparatet slå seg av innen 3 minutter. Eller hold Menyknappen nede for å slå av blodsukkerapparatet.



Se brukerveiledningen for CONTOUR NEXT LINK 2.4, pakningsvedlegget til stikkepennen og brukerveiledningen for MiniMed insulinpumpe for fullstendige instruksjoner. Ascensia Diabetes Care kundeservice kan nås på: +47 67 12 28 00 diabetes.1@ascensia.com www.diabetes.ascensia.com For informasjon om patenter og tilknyttede lisenser, se www.patents.ascensia.com

IVD Kun for in vitro diagnostisk bruk

ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

CE
2797

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen, Clinilog, Contour, Glucofacts og No Coding-logoen (Ingen koding) er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed og Paradigm er varemerker og/eller registrerte varemerker for Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic

© 2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.